

**HANSUN™ 韩尚®**  
ЭКСПЕРТ ВОСТОЧНОЙ МЕДИЦИНЫ

**NIMBUS**

# РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



Массажер для головы

FC8516A



Благодарим Вас за покупку массажера для головы Hansun.  
Пожалуйста, внимательно прочитайте эту инструкцию перед  
использованием. Уделяйте большое внимание мерам  
безопасности, чтобы избежать травмы  
или поломки массажера.

**Пожалуйста, сохраняйте данное руководство,  
чтобы всегда иметь его под рукой  
в случае необходимости.**

## СОДЕРЖАНИЕ

---

Введение	2
Особенности массажера	3
Составные части	4
Подготовка к использованию	5
Функционал массажера	6
Порядок использования	7
Меры безопасности	8
Устранение проблем в работе	10
Порядок чистки и хранения	11
Спецификация	12
Для заметок	13

Массажер для головы HANSUN FC8516A - это запатентованный продукт, который имеет независимые права интеллектуальной собственности, включая микропроцессорную технологию управления и эргономичную конструкцию для реализации интеллектуального интерфейса. Это обеспечивает полноценное интуитивно понятное управление и контроль с помощью функции однокнопочного касания и голосовых подсказок.

Массажер для головы HANSUN FC8516A способствует улучшению кровообращения, облегчению головной боли и нервного напряжения при помощи компрессионного стимулирования акупунктурных точек в области головы, вибрационного массажа и нагрева.

Функция встроенного музыкального сопровождения массажа с успокаивающими мелодиями заставит вас полностью расслабиться в процессе выполнения массажа.

### **Рекомендовано к применению:**

1. При эмоциональном стрессе и нервном беспокойстве
2. При изнурительной нагрузке и стрессе
3. При бессоннице и неврастении
4. При чрезмерных умственных нагрузках

### **Область применения:**

Массажер способствует улучшению кровообращения, снимает нервное напряжение и головную боль за счет разминающего воздействия на акупунктурные точки головы.


## ОСОБЕННОСТИ МАССАЖЕРА

Массажер для головы HANSUN FC8516A имеет микропроцессорное управление и эргономичный дизайн, который реализует интуитивно понятное управление и полностью интеллектуальный интерфейс.

Это позволяет пользователю изменять режимы при помощи одной кнопки и голосовых подсказок.

Массажер головы применяет воздушно-компрессионное воздействие, направленное на стимуляцию акупунктурных точек головы. Это способствует улучшению кровообращения, снимает нервное напряжение и головную боль.

### Акупунктурные точки головы, на которые воздействует массажер головы

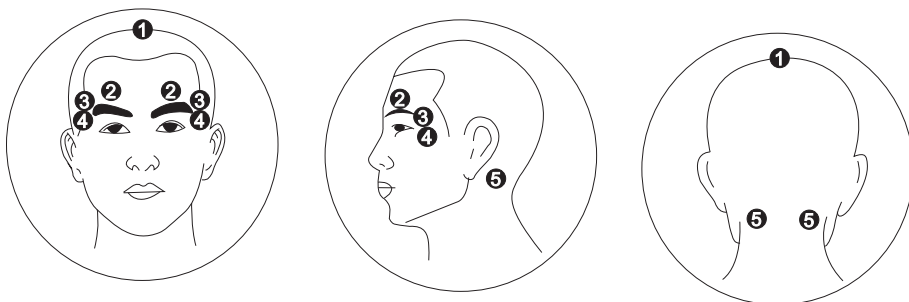


- ❶ Акупунктурная точка Baihui
- ❷ Акупунктурные точки Yinbai
- ❸ Акупунктурные точки Fajidian
- ❹ Височная область
- ❺ Акупунктурные точки Feng Chi


## ▶ СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ

---


### МАССАЖЕР ДЛЯ ГОЛОВЫ

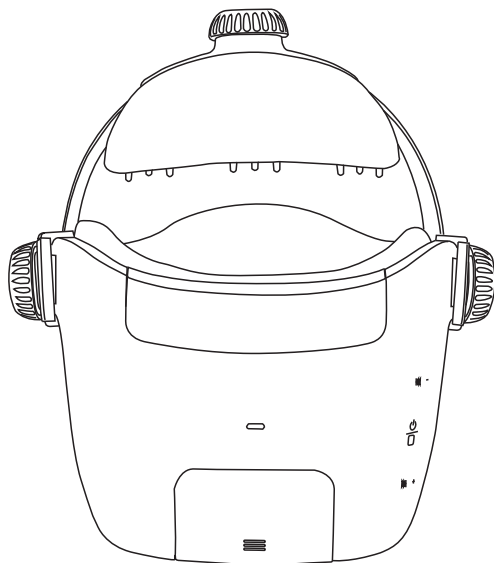


### АКСЕССУАРЫ МАССАЖЕРА

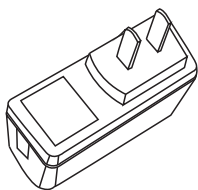

Адаптер питания

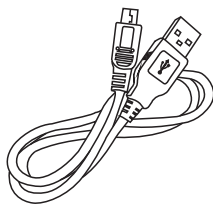

USB кабель

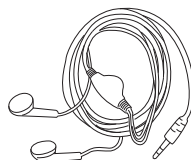

Наушники


## ▶ ПОДГОТОВКА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

### ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ


- ▶ Чтобы убедиться, что массажер заряжен, не подключайте его к адаптеру питания для зарядки. Используйте массажер только после зарядки, он не поддерживает работу во время зарядки. Обязательно выключите массажер и отключите его от питания, если не собираетесь использовать его в течение длительного времени. Не проводите длительную зарядку массажера, это может повлиять на срок его службы.

### ПОРЯДОК ЗАРЯДКИ МАССАЖЕРА

1. Откройте крышку, расположенную справа от отсека с аккумулятором, для доступа к USB разъему, который можно использовать для зарядки и загрузки музыкальных файлов.
2. Вставьте в разъем USB штекер кабеля для зарядки массажера, который идёт в комплекте. Подключите адаптер питания к сети.
3. В состоянии зарядки светодиодный индикатор мигает красным светом. После завершения зарядки индикатор загорится синим светом.
4. В состоянии зарядки массажер не может использоваться. (При начале зарядки массажер отключается автоматически).
5. Массажер работает от встроенного литиевого аккумулятора, время зарядки составляет 3 - 4 часа.

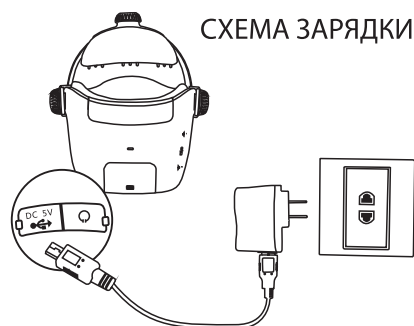

## ▶ ФУНКЦИОНАЛ МАССАЖЕРА

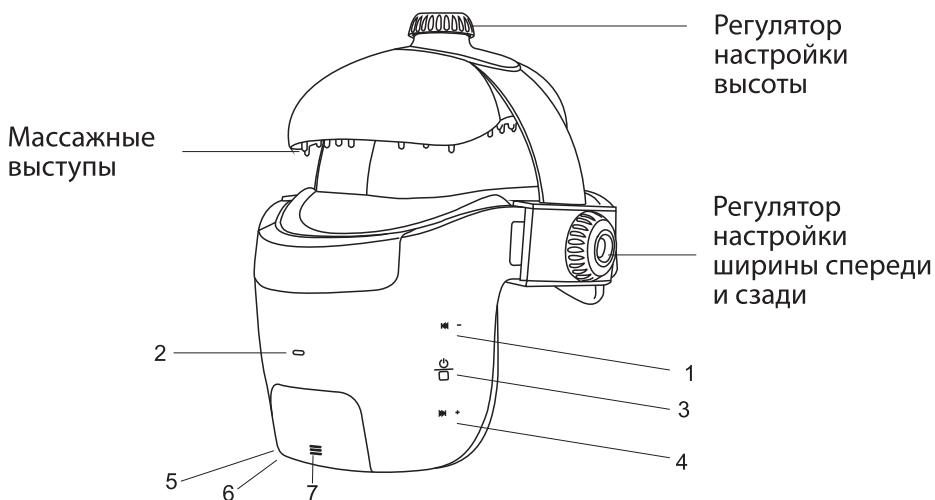

- 1. Кнопка перехода к предыдущему треку / уменьшение громкости** (Короткое нажатие переводит музыку к предыдущему треку. Длительное нажатие уменьшает громкость звука.)
- 2. Световой индикатор** (При включении массажера индикатор загорается красным светом и продолжает гореть в процессе работы массажера. При низком уровне заряда аккумуляторной батареи индикатор начинает мигать красным светом. Индикатор мигает красным светом в процессе зарядки массажера. При окончании зарядки индикатор загорается синим светом.)
- 3. Кнопка ВКЛ / ВЫКЛ и переключения режимов** (Нажмите и удерживайте кнопку в течение 2 секунд для включения/выключения массажера. Нажимайте кнопку без удержания для последовательного выбора 4 режимов массажа.)
- 4. Кнопка перехода к следующему треку / увеличение громкости** (Короткое нажатие позволяет перейти к следующему треку, длительное нажатие увеличивает громкость звука.)
- 5. USB порт для зарядки** (Для зарядки используется mini USB порт.)
- 6. Гнездо для наушников** (откройте заглушку, вставьте наушники)
- 7. Крышка аккумуляторного отсека** (Под крышкой размещается съемный литий-ионный аккумулятор.)

**Примечание:** Управляющие кнопки управления массажером используют сенсорную технологию переключения.



## ▶ ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

---


### УСТАНОВКИ ПО УМОЛЧАНИЮ:

#### Автоматический режим:

Режимы будут меняться каждые 60 секунд + Музыка



#### Одна клавиша может управлять изменением режимов:

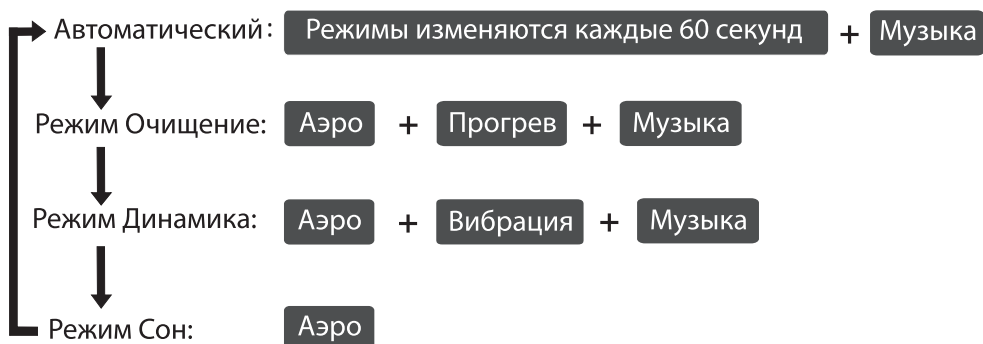

**Примечание:** При выборе каждого режима проходит звуковое оповещение, подсказывающее текущие настройки. Во время переключения режимов звучание музыки останавливается на 2 секунды, а затем автоматически возобновляется.







## МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- ▶ Перед использованием массажера, ознакомьтесь с мерами безопасности, чтобы гарантировать его правильную работу и избежать травм.
- ▶ Соблюдение мер безопасности поможет правильно применять массажер.
- ▶ Степень опасности и возможность нанесения ущерба, вызванные некорректным использованием массажера, классифицируются как "ВНИМАНИЕ" и "ОСТОРОЖНО". Каждый пользователь должен это учесть.

 <b>ВНИМАНИЕ</b>	Указывает пользователю, что он может серьезно пострадать при неправильном использовании массажера.
 <b>ОСТОРОЖНО</b>	Указывает, что при неправильном использовании массажера, может пострадать пользователь или возникнуть поломка.

	Символ "⊘" указывает на запрет того или иного действия. Подробное описание, Вы найдете далее. (Например: этот символ слева, указывает на запрет разборки массажера.)
	Символ "●" указывает на неукоснительное соблюдение предписанных требований. Подробное описание, Вы найдете далее. (Например: этот символ указывает на то, что нужно вытащить вилку из розетки)

### ВНИМАНИЕ

 ОБЯЗАТЕЛЬНО	<p>Следующие люди должны проконсультироваться с врачом перед применением массажера:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Люди, со встроенными электронными медицинскими имплантатами, например, кардиостимуляторами и др.</li> <li>2. Люди, проходящие курс лечения и плохо себя чувствующие.</li> <li>3. Люди с онкологическими заболеваниями, с заболеваниями сердца, с острыми болями или серьезными воспалительными процессами.</li> <li>4. Люди с заболеваниями головы или с нарушением кровообращения.</li> <li>5. Беременные или женщины во время менструации.</li> <li>6. Люди с остеопорозом или переломом позвоночника.</li> <li>7. Люди, с высокой температурой, выше 38°C (Фебрильная фаза).</li> </ol>
 ЗАПРЕЩЕНО	Детям или лицам с проблемами реального восприятия, запрещается использовать этот массажер для головы без присмотра.
	Не позволяйте детям играть с массажером.
	Массажер может использоваться одним человеком одновременно.
	Не используйте массажер, если сломан адаптер питания.
 НЕ РАЗБИРАТЬ	Не тяните, не сгибайте, не допускайте повреждений USB шнура питания.
	Людам, которые недавно перенесли операцию на глазах или на голове, следует воздержаться от использования данного массажера.
 НЕ РАЗБИРАТЬ	Никто другой, кроме квалифицированного персонала авторизованного нашей компанией, не должен разбирать или ремонтировать массажер. Если у Вас возникли проблемы, свяжитесь с сервисной службой.

## ▶ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ



### ОСТОРОЖНО

 ОБЯЗАТЕЛЬНО	Не используйте массажер без перерыва, более 15 минут.
	Не применяйте массажер в условиях высокой температуры и влажности.
	Пожалуйста, избегайте контакта массажера с водой, чтобы избежать неисправности или поражения электрическим током.
	Во время использования, пожалуйста, не накрывайте массажер одеялом или подушкой, так как чрезмерный нагрев может привести к травме и даже стать причиной пожара.
	Используйте только оригинальные аксессуары для массажера.
	Пожалуйста, не трогайте пульт мокрыми руками и не кладите на него тяжелые предметы.
	Пожалуйста, не используйте массажер головы лежа.
	Если массажер для головы с холода попадает в теплое помещение, воздержитесь использовать его сразу. Конденсация влаги может привести к неисправности. Рекомендуется использовать массажер спустя 5 часов после того, как он попадет в помещении с нормальной температурой.
	Не используйте массажер вместе с другими терапевтическим приборами.
	Не используйте массажер во время прогулок и при вождении автомобиля.
	Пожалуйста, не используйте этот массажер как средство лечения.
	Массажер предназначен для домашнего, некоммерческого использования.
	Прекратите использовать массажер, если почувствовали дискомфорт.
	Пожалуйста, следите, чтобы температура в помещении, во время использования массажера, резко не изменялась. (Используйте массажер в помещении с нормальной стандартной температурой).
 ЗАПРЕЩЕНО	Массажер имеет функцию нагрева, и пользователи, нечувствительные к высоким температурам, должны крайне осторожно его применять.
	Если во время использования, Вы почувствовали себя плохо, немедленно прекратите использовать этот массажер и проконсультируйтесь с врачом.
	Пожалуйста, используйте оригинальную аккумуляторную батарею и вынимайте ее, если не используете массажер длительное время.
	Пожалуйста, не используйте этот массажер для головы сразу после еды.
	Пожалуйста, не засыпайте с этим массажером.
	Не используйте массажер в состоянии алкогольного опьянения.
Пожалуйста, перед использованием, отрегулируйте громкость звука, так как высокая громкость может привести к проблемам со слухом.	
Пожалуйста, не чистите массажер для головы бензином или другими растворителями. Следите, чтоб рядом с ним не распылялись аэрозоли.	
Пожалуйста, не ставьте массажер вблизи горючих объектов.	
Пожалуйста, не курите во время использования массажера.	

## ▶ УСТРАНЕНИЕ ПРОБЛЕМ В РАБОТЕ

Если при использовании массажера возникают какие-либо проблемы, следуйте приведенным ниже инструкциям, чтобы проверить, сохраняется ли проблема. Если проблема осталась, пожалуйста выключите массажер и обратитесь в сервисный центр обслуживания.

№.	Проблема	Возможная причина	Решение
1	В массажере слышен звук трения.	Это нормально, когда массажер работает и при этом слышен звук трения головы о ткань покрытия.	Это нормально и не требует ремонта.
2	Массажер не включается.	Аккумулятор массажера полностью разрядился.	Зарядите аккумулятор перед использованием.
3	Массажер не реагирует на нажатие.	Аккумулятор массажера имеет слабый заряд.	Зарядите аккумулятор перед использованием.
4	Воздушная компрессия очень слабая.	Аккумулятор массажера имеет слабый заряд.	Зарядите аккумулятор перед использованием.
5	Отсутствует звук.	Наушники по-прежнему в гнезде для наушников.	Вытащите наушники.
		Проверьте включена ли громкость.	Увеличьте громкость.

## ▶ ПОРЯДОК ЧИСТКИ И ХРАНЕНИЯ

### Чистка

- ▶ Перед чисткой, пожалуйста, убедитесь, что питание массажера выключено, адаптер обесточен.
- ▶ Пожалуйста, используйте сухую ткань для чистки поверхности массажера.

#### **Внимание**

- ▶ Перед чисткой, пожалуйста, не забудьте выключить питание.
- ▶ Не используйте едкие чистящие средства, такие как бензол или растворители для чистки массажера, в противном случае, возникнут проблемы с покрытием массажера: исчезнет окраска, произойдет деградация материала.
- ▶ Не гладьте утюгом ткань покрытия.

### Методы хранения

- ▶ После чистки, если массажер не планируется использовать, в течение длительного периода времени, пожалуйста, выньте аккумуляторную батарею и накройте массажер пылезащитным чехлом (сплошным).

### Важные напоминания

Во время ежедневного использования, пожалуйста, проверяйте следующее:

- ▶ Исходит ли от массажера запах гари;
- ▶ При нажатии на кнопку питания, массажер иногда включается, иногда - нет.
- ▶ Массажер или шнур питания сильно нагревается;
- ▶ Другие неисправности или нехарактерные звуки.

#### **Предупреждение**

- ▶ Если присутствует хотя бы одна из перечисленных проблем, пожалуйста, прекратите использование массажера;
- ▶ Отключите электропитание, отсоедините адаптер и обратитесь в магазин, где приобрели массажер, или в сервисный центр. Для нормального функционирования массажера, любое техническое или другое обслуживание должно быть произведено только в авторизованном сервисном центре.

#### **Внимание**

- ▶ При выполнении техобслуживания, убедитесь, что отключен адаптер питания; Во избежание поражения электротоком, не прикасайтесь к вилке шнура питания мокрыми руками; пользователям запрещено самостоятельно разбирать массажер и проводить ремонт. Пожалуйста, в случае возникших проблем, обратитесь в авторизованный сервисный центр.

## ► СПЕЦИФИКАЦИЯ

---

Тип: Массажер для головы

Модель: FC8516A

Напряжение питания: DC  $\approx$  5 В

Мощность: 5 Вт

Ток зарядки:  $\leq$  500 мА

Адаптер питания: Входное AC 100-240В  $\sim$  50/60 Гц

Выходное: DC 5В  $\approx$  0,6А

Безопасность:





**HANSUN™ 韩尚®**  
ЭКСПЕРТ ВОСТОЧНОЙ МЕДИЦИНЫ

Массажер для головы

FC8516A